

PF-990 电子针灸穴位脉冲仪 (气血经络理疗仪)

资料说明书



PF-990 电子针灸穴位脉冲仪 (气血经络理疗仪)

大陆专利 ZL972440275

台湾专利 152935

台湾卫署医器制第 000751

欧洲 CE T625 UKSGS 认证

美国 FDA 21CFR 882.5890 上市许可号



产品规格:

电 源 : 3V 锂电池(CR2032)

电池寿命: 1 日 15 分约可使用 3 个月

产品尺寸: 89(W) × 58(D) × 6(H)mm

产品重量: 约 10g

波 频 : 约 2~40Hz

波 宽 : 100uS

功 能 : 八段强弱调整, 32 回按摩变化

自动定时: 15 分钟

附 属 品: 钮扣式黏贴片、电池为耗材。





最新颖最先进技术的结晶, 产品特色:

1. 为振动性之磁力线, 有贯通骨内神经之特性。当振动磁性波动渗透皮下组织时, 可使血液循环量增大, 促进新陈代谢, 使各脏器回复机能。
2. 当波动的回转跳动特殊频率在人体细胞内发生漩涡形的二次电磁热、贯通人体内部, 在身体内形成温热效应, 具有活络、镇痛消炎等神奇功效。
3. 本产品每分钟可发生 3000~6000 次的微小震动, 这种微震动可去除淋巴组织的停滞异变, 增加抵抗力, 消除极度疲劳。
4. 依据科学理论针灸推拿, 是中国传统医学中最古老且神奇的治疗法。运用穴位来诊断, 治疗和预防疾病, 在中华民族已有悠久的历史丰富的经验, 已是举世公认事实。
5. 本产品是依据临床认证结果作为基础, 使用多变脉冲, 其中包含治疗按摩波形具有“整体治疗”的最新观念, 符合大众所要求的方便性及经济条件, 且有抗老保健的功效, 能达到未来养生医学的多功能需要。
6. 贴片上之粘胶为耗材, 使用约 60~80 次, 若有粘度减退时, 可以手指轻沾水轻微擦拭, 待阴干后, 粘度会恢复。
7. 使用方便, 舒适隐密, 用于按摩疼痛部位, 有立即减轻疼痛及减轻疲劳酸痛及末梢神经麻痹之效果。提供您多种磁力波动, 消除您每天的工作压力。
8. 精、薄、无线超迷你尖端设计, 携带方便, 小型化设计, 使用简易有效, 方便且隐密性高。
9. 波动操作强弱八段调整, 适合每个人体质及耐受性。(微电脑控制 8 段强弱调整, 32 种疗效波形。)
10. 电子针灸穴位脉冲仪使用尖端微电脑芯片控制, 自动设定 15 分钟为一段疗程使用 15 分钟后自动关机, 于疗程中有多种能量波变化。例如揉、捏、敲、打、麻、灸等, 请耐心等待使用完整个疗程。
11. 进口大型软质贴片, 可作任何角度贴附。
12. 键简单、操作方便, 适合每个人的体质。
13. 机动性高, 附携带盒, 便于随身收藏, 随时使用。
14. “以痛为输”就是按病痛部位直接取穴, 在本产品中理疗瞬间伤疼如


腰伤, 肌腱发炎等, 藉由直接贴疗, 其反应局部酸胀感或酸麻感, 向前放射扩散状, 可达镇痛之功效。

15. “波动震荡”可促进血液循环、消除疲劳、松懈压力。让您在家中也能享受专业的健美护理。
16. 在腰部 15 分钟, 相当完成 75 次仰卧起坐运动所消耗的热能。贴于胸部 15 分钟等于做 60 次之扩胸运动。贴在小腿或大腿上 15 分钟相当于散步 3 公里之运动。
17. 消除身上的肥胖赘肉, 想瘦哪里就贴哪里, 不会有任何的副作用, 达到减肥瘦身的目的。
18. 舒解肩膀酸痛, 舒解末梢神经麻痹, 消除疲劳。

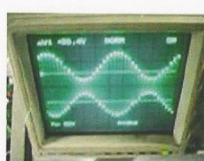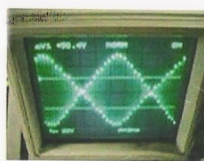




新型脈衝波變頻技術作用於皮膚時力量柔軟感覺較舒適是因為多樣化的波型例如方波正絃波按摩波微分波周歇積分波。

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1. 微分波+三角波 100% | 2. 方波 20% | 3. 正絃波 90% |
| 4. 正絃波+方波 50% | 5. 按摩波 | 6. 三角波+方波 |





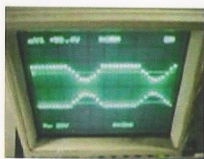


- | | |
|----------------------|----------------|
| 理療文獻: 1-20Hz 增加血管張力 | 4-10Hz 興奮交感神經 |
| 50 - 100 Hz 止痛及 擴張血管 | 25-50Hz 肌肉收縮 |
| 100 - 250 Hz 抑制交感神經 | 20-40Hz 興奮迷走神經 |

根據疼痛部位的深淺, 病理原因及需要, 新型低頻電子脈衝科技 搭配多樣化波型, 可以更有效發揮臨床應用價值。

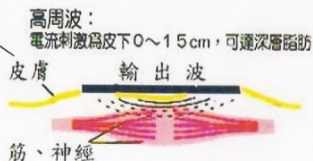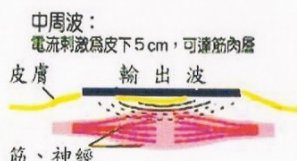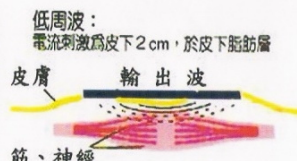

常用低、中頻電療治療試驗參數對照

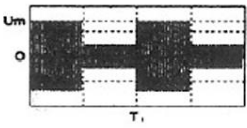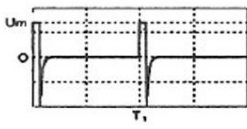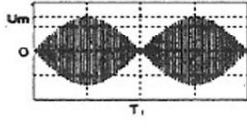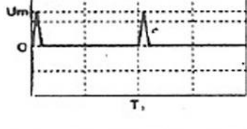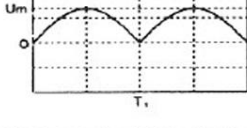波 形	序 號	電流名稱	輸出有效 電壓 (V)	治療有效 電流 (MA)	等效阻 抗 (Ω)	透 入 比
	1	脈沖調制 中頻電流	11.3	19.9	568	0.38
	2	低頻脈沖 電 流	3.15	1.74	1815	0.11
	3	正弦調制 中頻電流	9.00	13.2	680	0.32
	4	感 應 電 電 流	2.61	1.03	2524	0.082
	5	間 動 電 電 流	14.1	3.02	4685	0.044
<p>對照試驗條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 輸出電壓幅度相等，$U_m=20V$。 2. 低頻頻率 $F_1=100Hz$，$T_1=10ms$。 中頻頻率：$F_0=5000Hz$。 3. 使用同一電極。 4. 作用同一人體，同一部位。 						

② 低、中周波原理说明

电流可区别为二种。即直流与交流。取自干电池之电流称直流，而取自电灯线之电流称为交流。直流与交流电之相异处系前者为单行道而后者为双向道。直流只能从十向一的方向流动，但交流则每一秒钟从+经为-，从-变+方向，有好几次的变化。

每一秒变化几次方向，其”周期”（频率）称之为周波数。电灯线路每秒钟变换 50~60 次，在空中递的收音机之电波，则变换数为 10 万次以上。

变换 10 万次以上者称为高周波（高频率），而变化次数比此低很多者称之为低周波。每秒变换 1 次者叫做 1Hz (Herz)，故 50Hz 则表示变化 50 次。

低、中周波治疗器，一般都使用干电池，而在治疗器中将直流变换为交流，将低频率之电能输入体内，而其变换次数大约每秒 1~50 次，即约为 1Hz~50Hz 者。

为何输入些种低周波电流到体内就有医治效果呢？因为人体本来就有电流，传递感觉的神经就以电流做为传递的讯号。神经的递讯号与化学物质有关，但若没有电流之作用则不发生功效。

生病或身体不舒适时，体内的电流也变得不流畅。而体内所流动的电流就是低周波电流。因此，从体外通入低周波电流到体内时可以促进体内电流之流。从体外通入电流到体内之际，要紧的是要有效地流到内脏部位，而其通道，即上述之穴道最具功效。

低、中周波治疗经过临床实验证明，具有舒缓神经痛、肩膀酸痛、松弛紧张压力之功效，而无药物治疗所可能造成之副作用。

现在医学已发现，若体内有某种病变时，很容易在皮肤某部位发生变化，

即皮肤上某部位会发生电阻降低之现象。而该部位，很巧的是与经当学所说的穴道不谋而合者居多。

由此可见，穴道及经络以现代医学而言，可说是电流容易流通之处。低、中周波疗法就是以微电流通入穴道以代替针灸刺激穴道之方法，如上述穴道是电阻较低之处，若以此观之此乃刺激身体内部之最佳方法。

采用低、中周波穴道刺激治疗法获得良佳功效的领域有整形外科、妇产科、眼科、牙科等，其它诸如身体不舒服的症状，用低周波刺激治疗法亦获得相同良好的效果。

腰酸背痛虽有贴膏，但其功效不显著，眼睛疲劳点眼药水也徒劳无用。虽然有不必去看医生的轻微病症，但身体觉得很不舒服时，向来在家庭里鲜有良好的因应对策。

除药品外，在家庭唯一可以治疗之方法有所谓穴道指压，穴道刺激很多症状具令人惊奇之效果乃众所知晓之事，但实际上做治疗时，发现尚有很多困难。

第一，不容易找出穴道之正确位置，针灸治疗时行家可以 0.5m/m 误差范围内找出穴道位置针灸。指压若非正确地压在穴道其功效甚微。找出正确的穴道位置是第一个问题所在。

第二，不容易做好穴道之正确刺激方法。用力压住急快放开，或慢慢放开等，视其症状，刺激方法或指压时间有微妙之差异。

第三，很重要的事情乃指压由一个人自己做有一定的界限。脸部或手、脚或许可以由自己做指压治疗，但肩膀或背部非借助他人不可，且每天须做多次，就难以每天连续请人帮忙啦。

因此，不必那么正确地找出穴道位置，且刺激方法简单，可一个人自己操作治疗的利器


PF-990 **电子针灸穴位脉冲仪**，遂应运而生。疗用法极为简单，且有意想不到的功效。



使用安全注意事项:

使用前，为避免人为使用不当发生人身体伤害及物品损坏之危险，请务必详阅说明书，若有下列情况者之一，须经医师同意后使用：

1. 急性病患或患有感染性、传染病疾病患者。
2. 心脏病患及使用心律调整器者。
3. 血压异常者（180mmHg 以上）。
4. 发烧者（体温 38°C/100° F 以上）。
5. 恶性肿瘤患者、贫血、生理期、妊娠及孕妇。
6. 患部有伤口或贴片不完全贴于皮肤会有局部针灸感产生，请检查后使用。
7. 勿将电极片放在心脏、头部、面部、口部、阴部或末梢神经敏感部位。

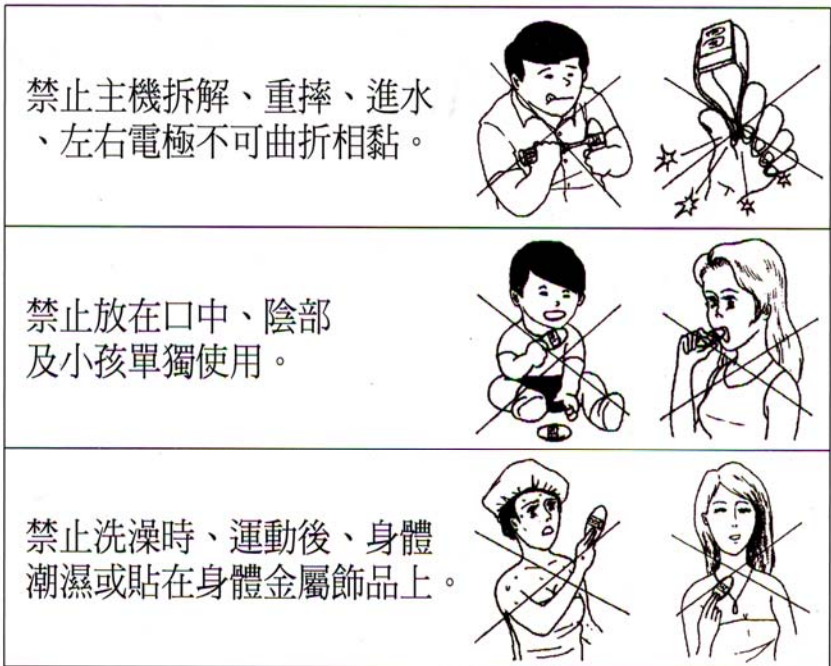

電池更換操作說明:

更換電池時有⊕記號向上傾斜放入主機電池槽內, 蓋上電池蓋即可。(注意: 開機後若燈不會亮, 則表示接觸不良。此時請將電池彈片A稍微拉出, 重新放入電池即可。)

黏膠為耗材, 使用約60-80次, 若有黏度減退時, 可以以手指沾水份擦拭, 約30秒黏性即可恢復或重新更換新膠片。




黏膠片更換操作說明
(鈕扣型)將已無黏性之鈕扣型膠片拋棄, 直接換新扣上




本產品經嚴格品保制度下生產, 如有故障或異狀, 在送修前請先檢查下列可能原因, 並自我排除節省您寶貴時間。

狀況	檢查	處理方式
燈號不亮	電池極性錯誤或電池沒電 電池彈片是否接觸正常	確認或換新電池 調整電池接觸
強度變弱	膠片是否有黏性 膠片耗損有異物 貼附不當。	用水擦拭後, 放置 30秒後再使用。 更換新膠片
燈號有亮 但無輸出 動作	輸出強度設定不當 膠片離形紙未撕去 電極片變形主機摔落進水	再按強幾段 撕去離形紙 送回維修

正面人體穴位圖

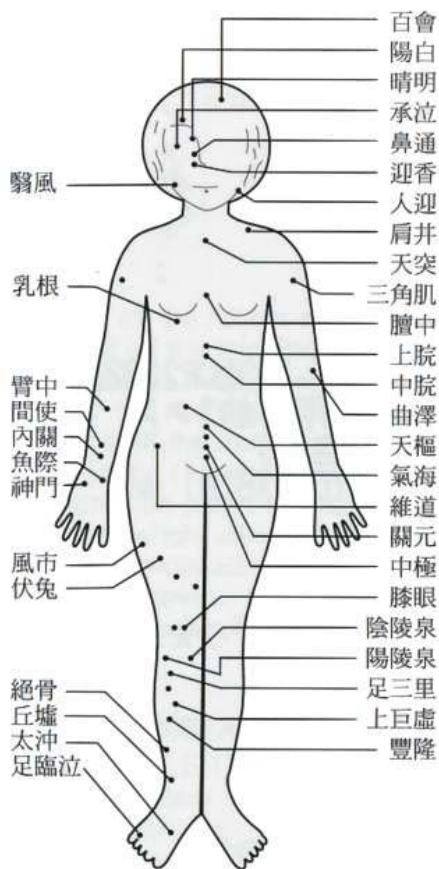

背面人體穴位圖

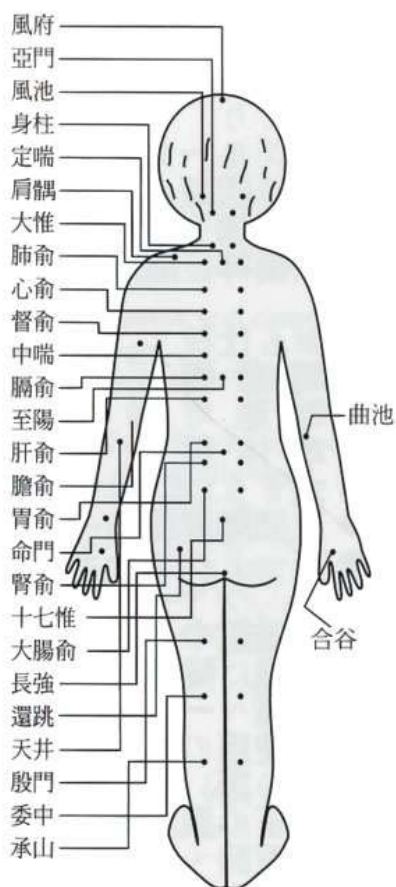

穴位治療參考

- 頭痛、頭重：合谷、大椎、人迎
頸部抽痛：身柱、人迎、肩髃、肩井
落枕：合谷、三間
暈眩：曲澤、長強
精神疲勞：築賓、身柱
宿醉：胃俞
支氣管炎：天突、肺俞
眼睛疲勞：睛明、陽白
鼻之疾患：迎香、風池
齒痛：下關、合谷、翳風
咳嗽氣喘：肺俞、定喘
重聽耳鳴：聽宮
肩膀酸痛：天井、肩井、肩髃
手筋肉痛：曲澤、曲池
上肢麻痺：臂中、手三里
手麻痺：曲澤、魚際
手關節痛：曲澤、間使、神門
五十肩：大椎、肩髃、三角肌、肩井
三叉神經痛：風池、肺俞、曲池、翳風
降血壓中風預防：足三里、三陰交
感冒：大椎、合谷、曲池
- 失眠：內關、神門、三陰交
經期不順：氣海、關元、腎俞、命門
高血壓：人迎、內關
養生：關元、足三里、曲池
糖尿病：腎俞、氣海、中極、委中
腸之疾患：天樞
嘔吐：神門、內關、臍中
胃下垂：百會、中脘、氣海
骨之疾病：膝眼、足三里、委中
夜尿症：關元、中極、腎俞
便秘：關元
精力增強：長強、腎俞、關元
腰痛：還跳、長強、委中
抽筋：委中、承山
下肢麻痺：委中、承山、腎俞
下肢神經痛：承扶、陰陵泉、三陰交
坐骨神經痛：大腸俞、環跳
腳部疲勞：委中、太沖、足臨泣
健胸：乳根
膝關節痛：委中、陽陵泉、膝眼





企业法人营业执照

注册号3102292097805

名称 上海卡琥数码科技有限公司
住所 青浦区白鹤镇鹤祥路1号T-403

法定代表人姓名 廖育嘉

注册资本 人民币伍拾万元

公司类型 有限责任公司(国内合资)

实收资本 人民币伍拾万元

经营范围 计算机专业领域内的技术咨询、技术服务, 电脑图文设计, 企业形象策划, 会展服务, 企业管理咨询, 投资咨询, 室内装潢设计, 设计、制作各类广告, 销售五金交电、电子产品、电讯器材、家用电器、机电设备、照相器材、化工原料及产品(除危险品)、计算机软硬件及配件、办公用品、日用百货、仪器仪表。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。

证照编号29000003200603151054
企业标识290000032006031500143



成立日期 二〇〇六年三月十五日

二〇〇六年 三月 十五日

营业期限 二〇〇六年三月十五日 至 二〇一六年三月十四日
执照有效期: 2006年03月15日 至 2016年03月14日

310229173g0039349498

税务登记证

地税 字 31022978589981X 号

纳税人名称: 上海卡琥数码科技有限公司
 法定代表人: 廖育嘉
 地址: 青浦区白鹤镇鹤祥路1号T-403
 登记注册类型: 私营有限责任公司
 经营方式: 服务
 经营范围: 主营: 计算机专业领域内的技术咨询、技术服务、电脑图文设计、企业形象策划、会展服务、企业管理咨询、投资咨询、室内装潢设计、设计制作各类广告、销售五金交电、电子产品、电讯器材、家用电器、照相器材、化工原料及产品(除危险品)、计算机软硬件及配件、办公用品、日用百货、仪器仪表。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
 兼营:

经营期限: 2006年03月15日至2016年03月14日
 证件有效期限: 2006年03月15日至2016年03月14日

发证税务机关 

二〇〇六年 三 月 十一 日

国家税务总局监制

实用新型专利证书



实用新型名称：电子理疗器

本实用新型已由本局依照专利法进行审查，决定于 1999 年 4 月 22 日授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自证书颁发之日起生效。

设计人：苏季阳

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费，缴纳本专利年费的期限是每年 11 月 6 日前一个月內。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利号：ZL 97 2 44027.5

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转让、继承、撤销、无效、终止和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

专利申请日：1997 年 11 月 6 日

证书号 第 324526 号

申请号 

专利权人：苏季阳

该实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行初

局长 姜颖



步审查，决定授予专利权。

第 1 页(共 1 页)

至延展凉核

口 月 年

口 月 年

日 月 年

日 月 年

效

能、

前項醫療器材經本署審核與藥事法之規定相符

應發給許可證以資證明

行政院衛生署署長 詹皓賢

發證日期 中華民國九拾柒年拾壹月貳拾壹日

有效期間 玖拾貳年拾壹月貳拾壹日

行政行



衛生部

中文名稱：貼寶低週波治療器

英文名稱：SHIANG Medical-Finzer Low Frequency Electric Therapy Instrument

類別：第十八類：物理治療用藥商名稱：科技股份有限公司

規格：F-F-090 器具

製造廠名稱：科技股份有限公司

製造廠地址：臺南市七期區二號四樓

行政院衛生署醫療器材許可證

衛署醫器類 字第 000751 號



FDA > CDRH > Database Super Search - Microsoft Internet Explorer

網址: <http://www.access.fda.gov/cdrh/cdrh/cfloc/search/search.cfm>

政府 / 法律 <http://www.access.fda.gov/cdrh/cdrh/cfloc/search/search.cfm?db=L37&ID=73482>



[Help](#) | [Download Files](#) | [More About Listings](#)

[New Super Search](#)

[Back To Search Results](#)

Device Listing Database

Proprietary Device Name: COSMO TENS PF-990 MINI DIGITAL WIRELESS PATCH

Common/Generic Device Name: TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATOR

Classification Name: STIMULATOR, NERVE, TRANSCUTANEOUS; FOR PAIN RELIEF

Device Class: 2

Product Code: GZJ

Regulation Number: 882.5890

Medical Specialty: Neurology

Owner/Operator: COSMO HEALTH INC.

Owner/Operator Number: 9044470

貼上15分鐘 消耗熱量等於

腹部 100次仰臥起坐

腹部 75次仰臥起坐

腹部 40次起伏運動

KA-666

KA-666

促進血液循環
加速新陳代謝

促進血液循環

KA-666

消除疲勞
氣血通暢

進而達到養生及治療的效果

KA-666

微電腦晶片

它採用微電腦晶片控制

KA-666

舒緩緊繃肌肉
強化肌肉纖維

強化衰弱之肌肉纖維

KA-666

磁力線
溫熱效應

會產生振動性不可見的磁力線

KA-666

3000至6000次

3000到6000次的超微被震動

KA-666

幫助治療運動引起的傷害最為有效

PF-990 电子针灸穴位脉冲仪答客问

1、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**需要使用药剂配合吗?

A: 中、高频脉冲具有直接渗透患部、消除酸痛的作用,直接贴于患部不须药材。

2、 Q: 中国医学院最近研究报告电针灸能有效消除酸疼活络筋骨是 否与此产品相似?

A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,就是根据此一原理,发出每分钟 3000~6000 次的波频脉冲,直接作用于肩膀酸疼,消除瘀血。

3、 Q: 以前医院做电疗时须拉很多电线很麻烦,本产品是否要拉线?

A: 因采用尖端集成电路控制的波频脉冲,实现了小形、无线化、方便性的理想理疗器。直接取代了传统医院大型及接线的理疗器效果更好。家庭主妇可一边工作一边使用。不会感到刺激,又因不热也无气味,可随时使用。

4、 Q: 本产品在工作中可以使用吗?如何知道有在运作治疗?

A: 无线式理疗器本体可一面生活,一面使用,其上面的红灯点亮时,表示仪器已在做理疗工作,同时可以发觉到有按摩的感受。

5、 Q: 有使用时间限制吗?可以随身携带吗?

A: 在家庭,在办公室都能(24 小时)使用只要手指轻按开关非常简便,可随时贴在感到酸疼的地方,配有携带盒,可到处随身携带。

6、 Q: 老年人及家庭主妇无法外出运动可以用来运动保健养生吗?

A: 使用时一人一机最符合卫生要求及专用隐密性。最适合家庭主妇腰酸背痛,手脚冰冷及老年人身体保健,不外出运动就可达运动养生之效果,无负担、无压力。

7、 Q: 开车时塞车疲劳打瞌睡有用吗?

A: 能帮助您和缓发怒的情绪、长途开车提神按摩。能减轻焦虑，最具振奋提神功效，尤其适用于繁重工作后，效果最佳。

8、 Q: 对性能力有帮助吗?

A: 能舒解精神，鼓动心情达到复苏，充满活力，有提神、壮阳效果能燃烧精力帮助您激发创造力。

9、 Q: 对新陈代谢有帮助吗?

A: 运用与人体自然波相似的超微弱电池，唤醒人体细胞的活化，促进新陈代谢对神经系统、高血压有效。能平衡内分泌，能帮助您在工作中或读书集中精神。

10、 Q: 可以用在美容、丰胸、生理期疼痛吗?

A: 能舒解神经疼痛，达到平衡效果此系列对安抚有很大的帮助，尤其是在生理期的时候。对皱纹、皮肤松弛、丰胸、美臀有超乎想象的绝佳效果。

11、 Q: 对中风及小儿麻痹需要做复健工作的人帮助吗?

A: 对中风及肌肉萎缩有最佳复健效果，具安定作用可帮助您刺激运动神经恢复，放松紧张。

12、 Q: 能减肥吗?

A: 可去除多余脂肪、调整肌肉与脂肪比例达到减肥效果不致肌肉松弛。

13、 Q: PF-990 电子针灸穴位脉冲仪,有医学理论基础吗?

A: 经络及穴位是本产品理疗的基础理论，要达到治病镇痛，皆在于气血通畅为主要诉求。

14、 Q: PF-990 电子针灸穴位脉冲仪,对于头痛及高血压的效果如何?

A: 可帮助您在紧张的生活中、放松心情，减轻焦虑及压力，具镇定、止痛作用。能提高细胞增殖效果增加自然免疫能力、对头痛和高血压有效。

15、 Q: 不懂穴道时如何治疗使用？

A: 本产品中理疗瞬间伤疼如腰伤、肌腱发炎等藉由直接贴疗，可达镇痛、疏风、降压之功效，并可参考盒内穴位说明书。

16、 Q: 对于因体质衰弱、导致之慢性疾病是否不需药物而提高自然治愈力，加速恢复健康？

A: 面临现在的高龄社会，老化病、体质病、慢性病、有与日俱增之势，医治此种疾病，以恢复其身体天生所具有之”自然治愈力”最为重要 **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**，能提高身体的新陈代谢，可以说是最为适合之疗法。

17、 Q: 使用时没有什么感觉是什么原因？

A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**，设计时考虑到每个人适应能力不同，所以在前 30 秒作微弱感接触所以较没有感觉，可以调整强度键，找到适合自己的强度另外老年人因神经感应及循环系统较差，强度应较一般人提高。

18、 Q: 感冒时应如何使用本仪器做治疗？

A: 感冒大都是滤过性病毒感染喉咙或气管所引起之呼吸器疾病，将本产品贴于手肘关节前 3 指位置处每天 2 至 3 次，并配合每小时服用维他命 C 500mg 连续 4-5 次功效颇佳。

19、 Q: 本产品为何能达到健美的功效？

A: 本仪器中的回转跳动特殊频率在人体细胞内发生漩涡形的温热效应能调理各部位的赘肉、结实松弛的肌肉组织可塑造出健美身段。

20、 Q: 不使用药剂对镇痛有效吗？

A: 本产品以特定波频刺激脑脊髓自生吗分泌，是经证实最有效能减轻及消除疼痛的方法之一。

21、 Q: 电池和黏片等耗材，以后可以买得到？

A: 电池可至一般电子专卖店购买，黏片可至本公司购买。

22、 Q: (A) 黏片可使用多久? (B) 电池可使用多久?

A: (A) 黏片约可是使用 80~100 次, 使用时如先清洁皮肤, 寿命更久, 如使用期间有黏性不佳时, 只需用湿纸巾擦拭干净, 15 秒后马上又恢复原有黏性。(B)大约为 20 小时, 电池 1 日 15 分约可使用 3 个月。

23、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,一组可以用多久?

A: 一般正常使用而非人为因素, 都享有一年保固。而产品本身为全密封式包装, 有防伪标签封贴, 妥善使用寿命更长, 不会轻易的损坏。

24、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,和一般减肥贴片有什么不同呢?

A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,是目前唯一经卫生署许可的治疗器, 他的优点是使用在那里就苗条到哪里, 让你拥有黄金比例的健美身裁, 先进的机体计算机程序精准的雕塑妳全身曲线。

25、 Q: 同时使用多组气血经络理疗器有何好处呢?

A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,的优点是改良自日本美容太空舱全身 32 处一次雕塑的设计, 将大型仪器做成可以随身随时 32 种方式瘦身的迷你机型, 如果同时多组使用, 更可超越一台价格百万的太空舱雕塑的效果, 让你在最短时间达到最惊人的减肥雕塑曲线完美效果。

26、 Q: 能简单说明用在减肥、健胸、提臀上有功效吗?

A: 贴在腰部 15 分钟, 相当完成 75 次仰卧起坐运动所消耗的热能。贴于臀部所消耗的热能等于作了 50 次的结实臀部运动可预防下垂。贴于胸部 15 分钟等于作 60 次扩胸运动可使胸部拉高尖挺结实。贴于小腿或大腿上 15 分钟, 相当于散步 3 公里之运动, 美化腿部曲线让您在家中也能享受到专业的健美护理。

27、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,有几种功能?

A: 答: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,有微电脑控制 8 段强、弱调整, 强度越强指示灯号越亮 32 种治疗方式, 每 30 秒变换一次, 适用于身体各处须雕塑部位, 并有 15 分钟自动定时开关。

28、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,的正确使用方法?

A: 天沐浴后效果最好,使用时间请多喝水及维他命 C (或玫瑰花茶、 橘子、葡萄柚等天然水果), 更可配合散步及有氧呼吸运动同一部位每次使用不超过二次, 上下来回、左右交替使用, 因为同一部份使用很久, 其身体新陈代谢尚未完成, 其效果反而不明显。

29、 Q: 使用 **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,多久可以有减肥的效果?


A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,与市面现有减肥贴片不同, 一般贴片标榜减肥公斤数字, 但 **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**是以使用者本身的腰围、手臂、大腿、臀围尺寸来计算, 让你想瘦哪里就贴哪里。

30、 Q: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,与其它电子减肥贴布有何不同?


A: **PF-990 电子针灸穴位脉冲仪**,完全是以百万级的太空舱之设计改良而成, 并且是 2005 年最新计算机芯片, 从他每 30 秒就改变治疗波形的 32 种变化, 可以了解并非一般从头到尾都一样的阳春机型可以相提并论的。



穴位参考图 1


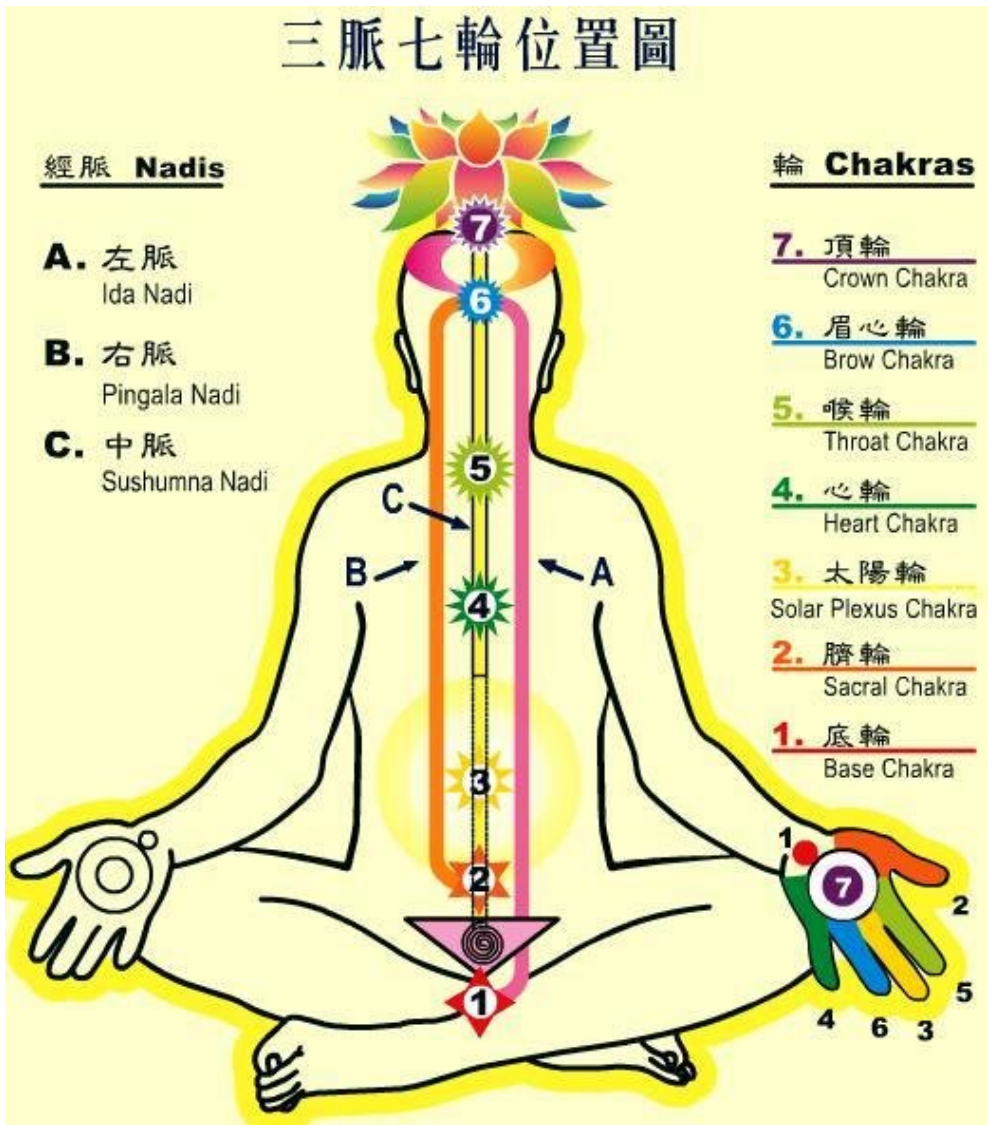


穴位参考图 2

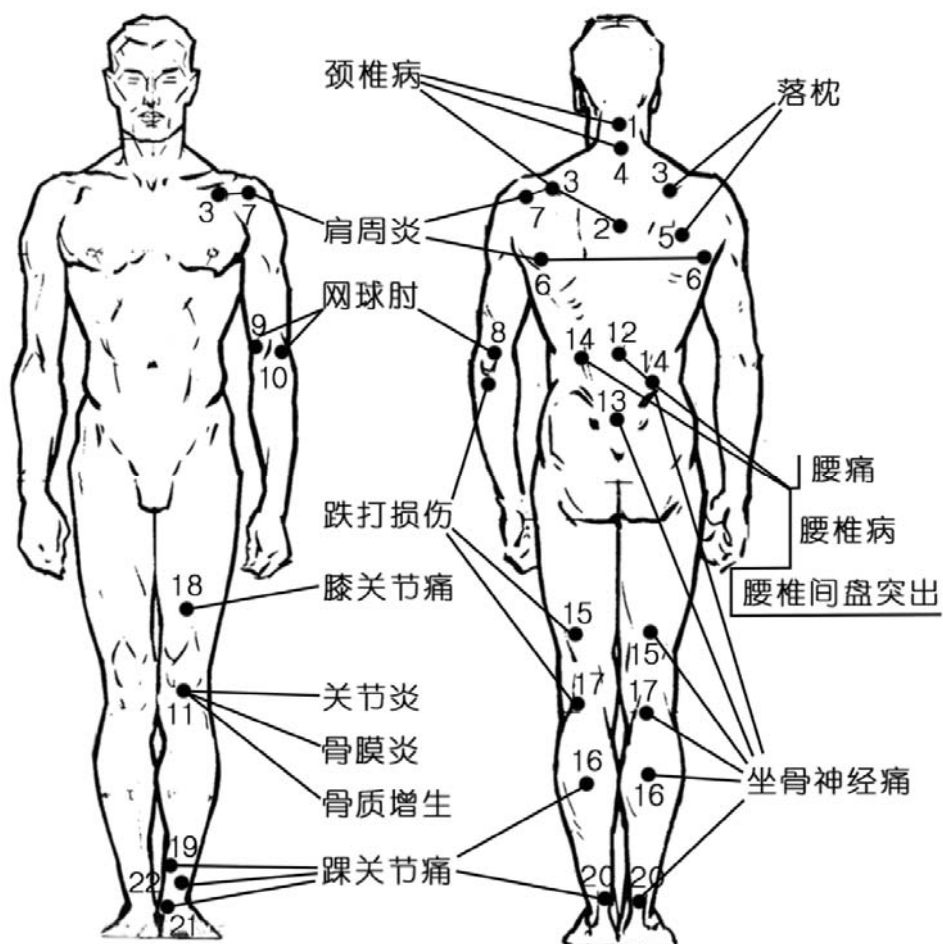

人体脏腑反射参考图



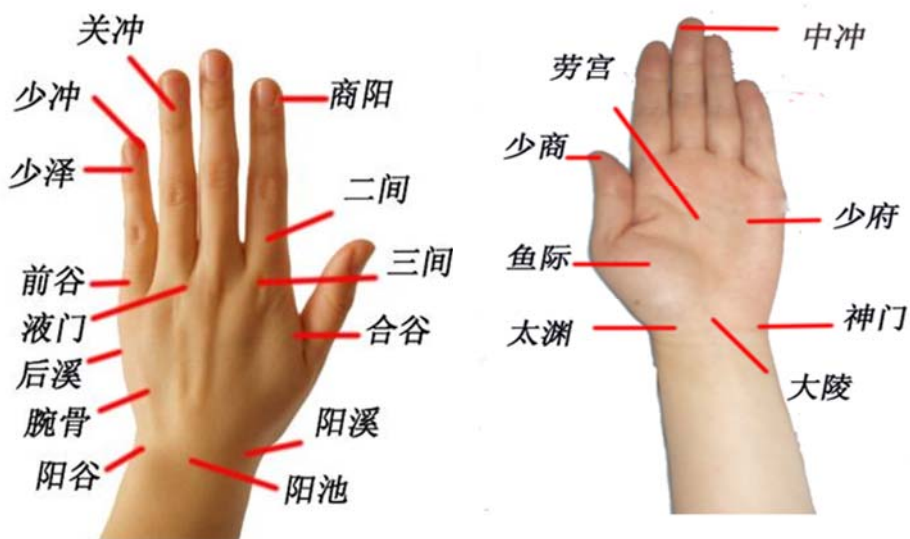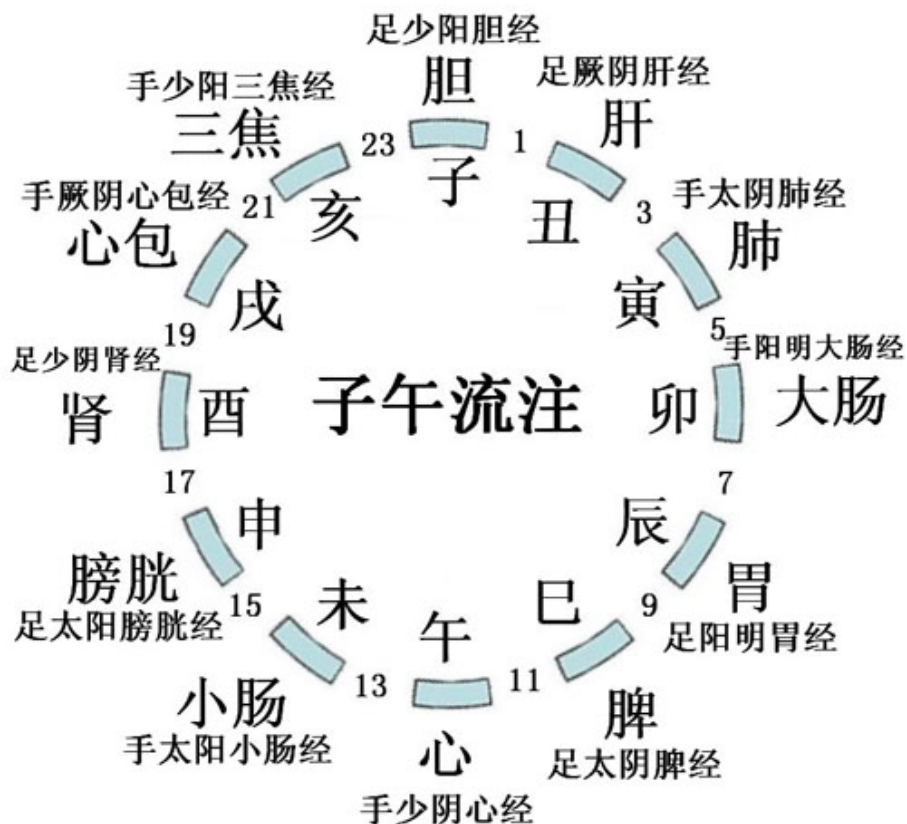

手掌骨 全息图



手的第二掌骨全息穴位图

エシバルス PF-990

MINE TENS 氣血理療器 經絡理療器

唯一經美國FDA CFR 882.5890嚴格認可

▶ 產品特色：

- A. 微電腦控制，八段強弱調整，32種療效波形。
- B. 精薄、超小型化設計，攜帶方便，使用隱密。
- C. 進口大型軟質貼片，可作任何角度貼附。
- D. 按鍵簡單，操作方便，男女老少皆宜。
- E. 15分鐘自動停止。



▶ 產品功能：

- A. 經過國家衛生署檢驗通過，且唯一經美國FDA嚴格認可，絕對安全舒適，有確實之功效。
- B. 經過3000~6000/min的微小震動，可去除淋巴組織的異變，進而增進其活動力、加強抵抗力、消除極度疲勞。
- C. 中醫所謂“以痛為輸”就是按病痛部位取穴，如腰傷、肌腱發炎等疼痛，可藉由直接貼療其反應局部酸脹感或酸麻感，可達鎮痛之功效。
- D. 波動震盪，可促進血液循環、消除疲勞、鬆懈壓力。讓您在居家中也能享受專業的健美護理，貼在腰部15分鐘，相當完成75次仰臥起坐運動所消耗的熱能。貼於胸部15分鐘等於做60次之擴胸運動。貼在小腿或大腿上15分鐘，相當於散步3公里之運動。

TENS其實是利用微量低週波刺激人體皮下神經組織及肌肉組織達至鎮痛及舒緩肌肉緊張的效果。其正式名稱為，氣血經絡理療器。





<http://www.kahoo.cn> E-mail:kahoo@163.com

上海卡琥数码科技有限公司
荣誉出品